



Beautycell

Návod k použití

Tento návod k použití obsahuje informace důležité pro vaši bezpečnost i pro nás, abychom zaručili vaši bezpečnost a abychom zabránili škodám na majetku. Pečlivě si jej přečtěte.

1. Součásti výrobkové sady

Obsah

● Před použitím

1. Součásti výrobkové sady 3
2. Součásti výrobku 4
3. Příprava před použitím 7

● Použití

4. Použití 9

● Program péče o pleť

5. Program péče o pleť
 - > Základní ošetření obličeje 11
 - > Péče o prolémové oblasti 12
 - > Péče o oblast očí 12
 - > Péče o oblast krku 13
 - > Péče o spodní část těla 13
 - > Péče o oblast paží 14
 - > Péče o oblast těla 14
 - > Péče o oblast břicha 14
6. Aplikace esence 15

● Informace

7. Manipulace s přístrojem Beautycell a jeho uchovávání 16
8. Bezpečnostní informace 17
9. Výstražné pokyny k používání 19
10. FAQ – často kladené otázky 20
11. Záruka na výrobek 22



Před použitím



- Beautycell - přístroj péče o pleť a tělo



- AC adaptér



- Návod k použití (záruka)


2. Součásti výrobku

• Tělo přístroje Beautycell

Before use



• Tlačítko napájení a tlačítko nastavení úrovně síly 1~4

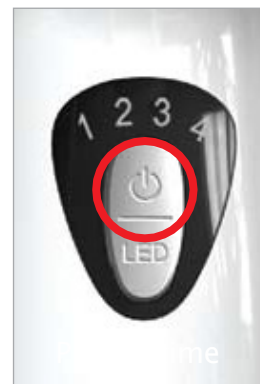

- Stiskněte 1 x = **úroveň 1** (slabá)
- Stiskněte 2 x = **úroveň 2** (střední)
- Stiskněte 3 x = **úroveň 3** (střední až silná)
- Stiskněte 4 x = **úroveň 4** (silná)
- Stiskněte 5 x = **vypnutí**

Na používané úrovni bude svítit červené světlo.

Stiskněte 1x



ÚROVEŇ 1

Stiskněte 2x



ÚROVEŇ 2

Stiskněte 3x



ÚROVEŇ 3

Stiskněte 4x



ÚROVEŇ 4

Stiskněte 5x
vypnutí

LED paleta nesouvisí s úrovní intenzity. Barevné led světlo se nezmění, ani když stisknete tlačítko úrovně intenzity.

- Při prvním použití nastavte na úroveň 1. Upravujte sílu v závislosti na přizpůsobení vaší pleti po provedení testu.

Před použitím

3. Příprava před použitím

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené informace..

• Tlačítko pro volbu programu péče



Pomocí tlačítka pro volbu programu můžete zvolit 6 druhů programů péče o pleť. Každé stisknutí LED tlačítka vás přepne do dalšího programu.

Program 1	Svítlí celé LED světlo	Program 2	LED světlo celé svítí a bliká
	• Červená+hnědá+modrá • Efekt celkové péče		• Červená+hnědá+modrá • Efekt celkové péče • Proniká hlouběji do pokožky a zaručuje optimální účinek.
Program 3	Červené LED světlo	Program 4	Hnědé LED světlo
	636(±10)nm Podporuje regeneraci buněk, a zlepšuje tak elasticitu pleti a vrásky, předchází stárnutí.		592(±10)nm Udržuje čistotu a jas pleti. Také zlepšuje vaskulární léze, melazmata, modřinky a červené skvrny na pleti.
Program 5	Modré LED světlo	Program 6	Vibrace, LED světlo nesvítí
	412(±10)nm Díky dezinfekčnímu a sterilizačnímu účinku zlepšuje akné a keratózu.		Nízkofrekvenční vibrace 200x za sekundu aktivují metabolismus pokožky a dobu regenerace, zlepšuje se elasticita pleti.

Beautycell je navržen tak, aby se automaticky vypínal 10 minut po použití, předchází tak případnému poškození pleti z důvodu nadměrného používání.

• Pokyny k používání přístroje

1

Doporučené používání je jednou denně třikrát týdně.

- Při každém ošetření aplikujte maximálně 10 minut.
- První 2 týdny aplikujte 3x týdně a poté používání upravte v závislosti na přizpůsobení vaší pleti.

2

Před započetím programu péče z pleti odstraňte make-up a nečistoty.

- Program péče o tělo používejte po vysprchování.

3

Stav pleti se mění v závislosti na fyzické kondici.

- Dojde-li k podráždění pleti, např. se vyskytne vyrážka, červená skvrna nebo svědění, s použitím okamžitě přestaňte a poraďte se se svým lékařem.

4

Pokud se na pokožce vyskytnou jakékoli problémy, poraďte se s lékařem.

- Problémy s pletí může způsobit i stres, fyzická konstituce a vnitřní problémy s orgány. Pokud budete mít jakýkoli z těchto problémů, konzultujte je s lékařem.

► Beautycell – pokyny a tipy pro uživatele

- Aplikujte jednou denně (přibližně 10 minut) / 3x týdně.
- Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, sondu přístroje přesně umístěte na pleť.
- Sondu jemně stiskněte a pohybujte s ní pomalu, pro liftingový účinek.
- Aplikujte po dlouhé procházce nebo volnočasových aktivitách, potom pocítíte ještě lepší účinek.

3. Příprava před použitím

• Příprava před ošetřením pleti

- ① Sundejte si všechny kovové doplňky, které nosíte (hodinky, prstýnky, náušnice, náramky atd.)
- ② Odstraňte make-up a pleť omyjte nebo očistěte.
- ③ Před aplikací si sundejte kontaktní čočky.
- ④ Před aplikací programu tělové péče odstraňte případné zbytky opalovacího nebo jiného krému.

• Příprava přístroje

- ① Nejprve zkontrolujte, zda je sonda hlavice (která se přímo dotýká pleti) a LED světlo čisté.
- ② Ujistěte se, že je přístroj nabitý. Pokud ne, nabijte jej nebo připojte adapter.

• O nabíjení přístroje

Přístroj lze používat po nabití nebo s připojeným adaptérem pro zapojení do sítě.



Nabíjí se



Plně nabit

Nabíjení těla přístroje

- Celková doba nabíjení: 5 hodin
 - Následná doba používání: 3 hodiny
- ※ Celková doba nabíjení a následná doba používání se může lišit, v závislosti na prostředí používání a frekvenci.

! Upozornění k připojení adaptéru pro použití v el. síti

- Držte zástrčku a odstraňte napájecí kód/kabel.
>> Pokud zatáhnete za kabel, může to způsobit poškození krátkého kabelu/drátu, který je uvnitř kabelu nebo deformaci zástrčky a následný zkrat. Zacházejte s nimi opatrně.

4. Použití

• Správné použití

번역추가

헤드(프로브) 밀착 방법



Správné použití – všechny 4 kovové plochy se zcela dotýkají pleti.



Nesprávné použití – pleti se nedotýkají všechny 4 kovové plochy.

• Umístěte na pleť všechny čtyři sondy.

• V závislosti na oblasti použití se může stát, že se pleti nebudou dotýkat všechny 4 sondy. V takovém případě se snažte o to, aby se pleti dotýkal co největší počet sond.

Použití masáže

• Sondy lehce stlačte na pleť a pohybujte pomalými krouživými pohyby jako při liftingu.

• 뷰티셀을 움직이는 속도는 턱에서 귀 밑까지를 기준으로 약 5초정도 소요되는 속도가 적당합니다.


번역추가

• Podrobné informace k použití naleznete v programech péče v návodu k použití (strana 11).

4. Použití

1. Nastavení úrovně intenzity (tlačítko ON/OFF)

- Zapněte přístroj a nastavte příslušnou úroveň, od ÚROVNĚ 1 do ÚROVNĚ 4.

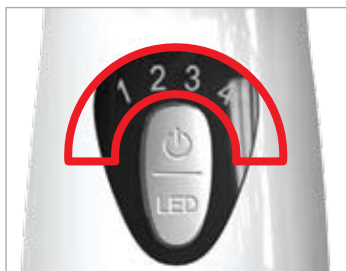

► Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)

- Stiskněte 1 x = úroveň 1 (slabá)
- Stiskněte 2 x = úroveň 2 (střední)
- Stiskněte 3 x = úroveň 3 (střední až silná)
- Stiskněte 4 x = úroveň 4 (silná)
- Stiskněte 5 x = vypnutí



※ Při prvním použití nenastavujte vyšší úrovně.

Začněte nižší úrovní a postupně zvyšujte v závislosti na přizpůsobení vaší pleti.

2 Zakončení ošetření

- Pokud si přejete proces přerušit nebo ukončit, stiskněte tlačítko pro vypnutí.
- Před uspořádáním všech jednotek se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

- ! • Je-li pleť při použití příliš horká nebo se na ní vyskytne nějaký problém, okamžitě přestaňte přístroj používat a při příštím použití snižte úroveň intenzity.
- Neaplikujte na stejné místo déle než 10 minut a než přejdete na další oblast, nastavte intenzitu v závislosti na typu vaší pleti.

5. Program péče o pleť (kurz č. 1)

Kurz č. 1: Základní ošetření obličeje (10 minut)

- Nastavte úroveň intenzity v závislosti na typu vaší pleti..
- Program 2- nastavte na kompletní ošetření pleti (LED svítí a bliká).




- Pro masáž v oblasti čelistí, krouživými pohyby.
- Od konce oblasti čelistí k spodní části uší masírujte rovnými pohyby.




- Od čelistí a strany úst do dolní části uší masírujte rovnými pohyby.
- Od strany nosu a postranní části, kde končí oči, k oblasti spánků masírujte rovnými pohyby.




- Od oblasti čelistí a směrem od úst do dolní části uší masírujte krouživými pohyby.
- Od postranní části nosu a oblasti, od očí směrem ke spánkům masírujte krouživými pohyby.

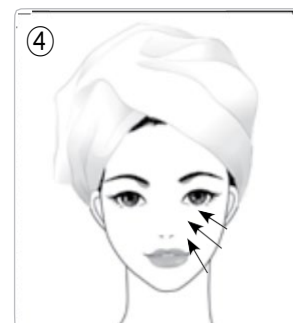

- Od linie v oblasti čelistí do bodu, kde začíná oblast tváře – masáž rovnými pohyby.

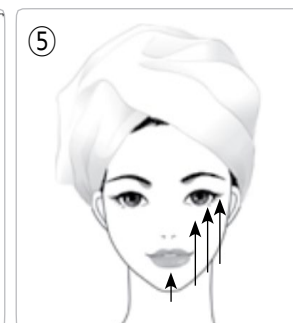

- Od oblasti čelistí po oblast pod očima masírujte rovnými pohyby.

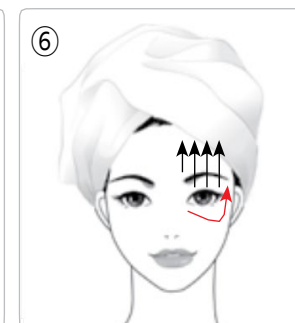

- Od oblasti pod spodním očním víčkem ke spánkům, masírujte zakřiveným pohybem.
- Od obočí k oblasti čela masírujte rovnými pohyby.

Masírujte na obou stranách, vpravo i vlevo, po dobu 5 minut..



Kurz č. ② : Péče o problémové oblasti (5 minut)

- Nastavte úroveň intenzity podle typu vaší pleti.
- Program 2- Set on total skin care type (LED lamp all on and flashes).



1 - Pleť po umytí osušte.


2 Na problémové místo naneste přiměřené množství esence.
- Po 30 minutách ji setřete bavlněným tamponkem nebo ubrouskem.

3 Nanášejte opakovaně každých 5 minut.
- Neaplikujte po dobu delší než 15 minut.



Kurz ③ : Péče o oblast očí (2 minuty)

- Nastavte intenzitu podle typu vaší pleti.
- Zde při nastavování intenzity postupujte velmi pečlivě, protože oblast okolo očí je velmi citlivá..
- Program 2- Nastavte na typ celkového ošetření (LED světlo svítí a bliká).

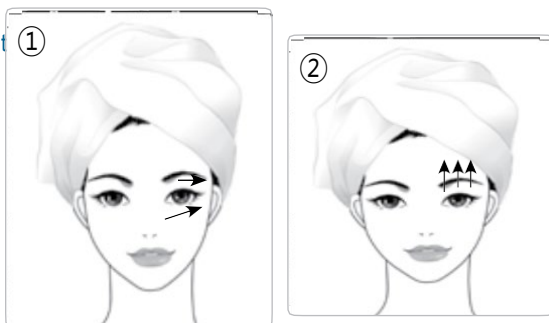


※ Masírujte 5 minut po obou stranách, vpravo i vlevo.

1 - Od oblasti pod očima a pod spodním očním víčkem ke spánkům, masírujte rovnými pohyby.

2 - Od očního víčka k obočí směrem nahoru rovně.

Kurz ④ : Péče o oblast krku (5 minut)

- Nastavte intenzitu podle typu pleti .
- Program 2- Nastavte na celkovou péči o pleť (LED světlo svítí a bliká).

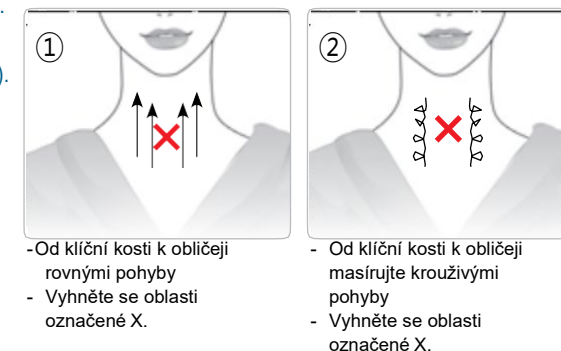

1 - Od klíční kosti k obličejí rovnými pohyby
- Vyhněte se oblasti označené X.

2 - Od klíční kosti k obličejí masírujte krouživými pohyby
- Vyhněte se oblasti označené X.



Kurz ⑤ : Péče o spodní část těla (25 minut)

- Program 2- Nastavte na celkovou péči (LED světlo svítí a bliká).
- Pro lepší výsledky aplikujte před započetím ošetření zpevňující krém.



Přední část stehen (10 minut)
- Malé krouživé pohyby vertikálně.
- Malé krouživé pohyby horizontálně.
- Zespoda nahoru rovně.

Zadní část stehen (10 minut)
- Malé krouživé pohyby vertikálně.
- Malé krouživé pohyby horizontálně.
- Zespoda nahoru rovně.

Lýtka (5 minut)
- Malé krouživé pohyby vertikálně
- Malé krouživé pohyby horizontálně
- Zespoda nahoru rovně.

※ Pro optimální výsledky proveďte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé části) pomocí nízkofrekvenční vibrační péče (vibrace, LED světlo vypnuto).

5. Program péče o pleť (6-8)

kurz⁶: Péče o oblast paží (10minut)

- Program 2- nastavte na celkovou péči o pleť (LED světlo celé svítí a bliká)
- Pro lepší výsledky aplikujte před započetím ošetření zpevňující tělový krém.



- Na pažích a ramenou masírujte krouživými pohyby.



- Na horní části paží masírujte malými krouživými pohyby.



- Na horní dolní části paží masírujte malými krouživými pohyby.

※ Masírujte 5 minut na obou stranách, vpravo i vlevo.


※ Pro optimální výsledky aplikujte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé části) pomocí nízkofrekvenčního vibračního ošetření (vibrace, LED světlo vypnuté).

kurz⁷: Péče o oblast boků (5minut)

- Program 2- nastavte na celkovou péči o pleť (LED světlo celé svítí a bliká).
- Pro lepší výsledky před započetím ošetření aplikujte zpevňující tělový krém.



- Masírujte od oblasti boků směrem ke kostrči malými krouživými pohyby.

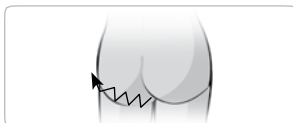

- Masírujte v oblasti boků pohyby "cik cak".



Masírujte od oblasti boků ke kostrči rovnými pohyby.

※ Pro optimální výsledky aplikujte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé části) pomocí nízkofrekvenčního vibračního ošetření (vibrace, LED světlo vypnuté).

Kurz⁸: Péče o oblast břicha (10 minut)

- Program 2- nastavte na celkovou péči o pleť (LED světlo svítí a bliká)
- Pro lepší výsledky před započetím ošetření aplikujte zpevňující tělový krém




Masírujte oblast pupíku malými krouživými pohyby.



Masírujte horní a dolní část břicha malým krouživými pohyby.



Masírujte pubickou oblast malými krouživými pohyby.

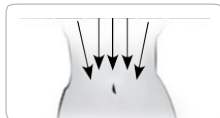


Masírujte pubickou oblast shora dolů rovnými pohyby.

※ Pro optimální výsledky aplikujte zakončující masáž (méně než 5 minut u každé části) pomocí nízkofrekvenčního vibračního ošetření (vibrace, LED světlo vypnuté).

6. Aplikace esence

• Aplikace esence

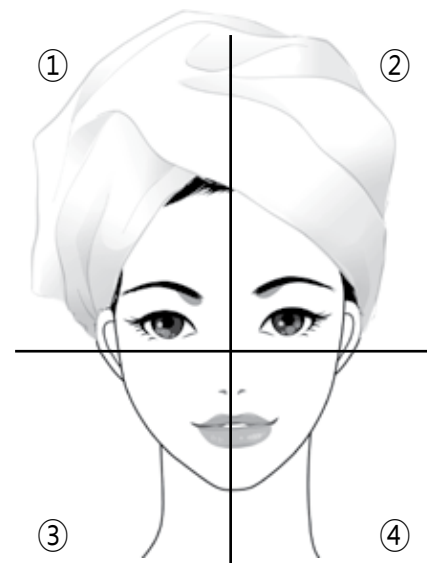

Při péči o celý obličej neaplikujte najednou, ale obličej si rozdělte na 4 části a aplikujte nejprve na jednu část, a tím začnete s ošetřením.

※ Pokud se během aplikace obličej vysuší, naneste esenci znovu.

Při manipulaci s esencí postupujte opatrně

- Do lahvičky s esencí nenechte vniknout vzduch.
- Snažte se neznečistit pipety.
- Víčko ihned po použití zavřete.
- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přípravek dostane do očí, vymyjte jej vodou a poraďte se s lékařem.
- Udržujte mimo působení vysokých teplot a vlhkosti (mimo dosah přímého světla a daleko od toalety).
- Neuchovávejte blízko topení a v autě.
- Aplikujte pouze v souladu s určením.

7. Manipulace s přístrojem Beautycell a jeho uchovávání

※ Před prováděním kontroly zařízení nejprve vypněte.

• Manipulace s přístrojem po použití

	Ze sondy a LED světla setřete zbytky esence a nečistot. Znovu setřete suchým hadříkem a vysušte vlhkost.
	Nepřekrývejte ani nepřetáčejte napájecí kabely. Mohli byste způsobit poškození nebo zkrat uvnitř kabelu nebo deformaci zástrčky a následnou poruchu.
	Přístroj nečistěte hořlavými přípravky, např. benzínem nebo acetonem. Mohli byste způsobit deformaci nebo poruchu.

• Uchovávání přístroje po použití

- Přístroj neukládejte v oblastech s přímým světlem, ve vysokých teplotách, prachu nebo vlhkosti.
- Výrobek není voděodolný, a proto jej uchovávejte mimo dosah vody.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

• Nabíjení a sada baterie

- Nabíjení trvá asi 5 hodin.
- Po úplném nabití můžete přístroj používat přibližně 3 hodiny, na úrovni 4.
- Sadu baterie můžete používat přibližně 2 – 5 let, ale závisí to na frekvenci používání a na prostředí, zvycích, počtu let použití (záruka na sadu baterie je 1 rok od nákupu)
- Pokud se baterie rychle vybíjí i po kompletním nabití, je možné, že už je zastaralá. Kontaktujte personál obchodu nebo zákaznický servis (po 1 roce záruky lze baterii vyměnit za poplatek).

8. Bezpečnostní informace

Z bezpečnostních důvodů je třeba s elektrospotřebiči řádně manipulovat. Pokud tomu tak nebude, může to způsobit újmu na zdraví z důvodu požáru nebo úrazu el. proudem. Abyste takovým škodám zabránili, přečtěte si pozorně následující informace a řádně je dodržujte. Nehoda, která může z důvodu chybného použití nastat, je rozdělena do 2 částí, varování a výstraha.

 Varování	Pokud nebudete respektovat toto varování, může to způsobit vážná zranění.
 Výstraha	Pokud nebudete respektovat tuto výstrahu, může to způsobit zranění nebo poškození majetku..

VAROVÁNÍ

Tento výrobek je určen pro domácí i zahraniční trh.	Připojte AC adaptér (zařízení se stejnosměrným proudem) do domácí zásuvky 220 V. V případě připojení k jinému napětí může vzniknout požár nebo nastat úraz el. proudem.
S napájecím kabelem a zástrčkou zacházejte správně.	Dodržujte následující body, abyste předešli požáru a úrazu el. proudem způsobeném poškozením napájecího kabelu nebo zástrčky. ▶ Napájecí kabel a zástrčku neupravujte. ▶ Napájecí kabel neohýbejte. ▶ Na napájecí kabel neumísťujte jiné předměty. ▶ Napájecí kabel neumísťujte v blízkosti topného zařízení. Poly vrstva na povrchu kabelu by se mohla roztavit. ▶ Při odpojování napájecího kabelu držte zástrčku a tělo AC adaptéru.
Používejte pouze přiložený AC adaptér.	Použití jiného nez přiloženého AC adaptéru, který poskytl výrobce, může způsobit požár a úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte ani AC adaptéry určené pro jiné přístroje.

9. 사용시 주의사항



Вýстраha

Pokud nastane některý z uvedených jevů, požádejte o následný servis.	Používání rozbitého přístroje může způsobit požár, úraz el. proudem nebo zranění. ▶ Abnormální zvuky, zápach nebo kouř vycházející z přístroje. ▶ Pokud do přístroje vnikne voda. ▶ Upuštění nebo částečné poškození těla přístroje. ▶ Pokud přístroj řádně nefunguje. ▶ Jakékoli poškození napájecího kabelu nebo zástrčky. ▶ Jakákoli oblast napájecího kabelu bude příliš horká.
Nepoužívejte v oblastech s působením vlhkosti, prachu, oleje, kouře a páry.	Může způsobit úraz el. proudem V případě poruchy a potřeby inspekce vnitřku přístroje kontaktujte personál obchodu nebo zákaznický servis.
Na zástrčce a připojovací části setřete prach, vodu a jiné nečistoty	Může způsobit požár a úraz el. proudem nebo poruchu.
Přístroj nepoužívejte v případě jakéhokoli poškození napájecího kabelu nebo v případě připojení do uvolněné zásuvky.	Součásti již nepoužívejte a kontaktujte personál obchodu nebo zákaznický servis.
Na tělo přístroje nepokládejte těžké předměty.	Může způsobit zranění, obzvláště u dětí.
Tento výrobek používejte pouze v souladu s účelem uvedeným v tomto návodu k použití	Může způsobit poruchu výrobku.
Tělo přístroje a každá jednotka obsahuje jemné součásti, proto s přístrojem zacházejte opatrně (předcházejte upuštění, nárazům atd.).	Vnitřní poškození přístroje může způsobit poruchu.
Nedoporučuje se pro osoby se zdravotními problémy (apatie, expresivní porucha atd.)	Před použitím konzultujte se svým lékařem, zda je pro vás přístroj bezpečný.
- Přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel. Kontaktujte zaměstnance obchodu nebo náš zákaznický servis a následný servis (Tel: 1899-2272/Zdarma: 080-040-0001) prostřednictvím servisu	

Вýstražné pokyny k používání

Přístroj nenechávejte dlouho na jednom místě a pomalu s ním pohybujte.	Může způsobit zranění, např. popáleniny.
Neaplikujte na jedno místo déle než 10 minut	Může způsobit zranění, např. popáleniny.
Pokud chcete aplikovat znovu na stejné místo, musíte počkat 5 hodin	Může způsobit zranění, např. popáleniny.
Pokud je nějaký problém s tělem přístroje, nepoužívejte jej a vypněte jej. Kontaktujte následný servis a centrum požadavků k produktu	Může způsobit nehodu.
Nanášejte dostatečné množství esence, aby se mezi pokožkou a hlavou přístroje vytvořila vrstva esence.	Aplikujte dostatečné množství esence pro získání optimálních výsledků pomocí bezproblémového přenosu.
Abyste předešli přehřátí vnitřních součástí přístroje, aplikujte znovu po 10 minutách od vypnutí.	Delší doba používání přístroje může způsobit zkrácení jeho životnosti.
Nepoužívejte na místech, kde je vysoká teplota a vlhkost nebo velké množství prachu, např. v kuchyni, koupelně nebo v autě.	Může to způsobit zkrácení životnosti přístroje a poruchu.
U citlivé pleti může použití způsobit problémy z důvodu kontaktu s kovem. V takovém případě můžete Beautycell znovu použít až po 3-4 dnech.	▶ Přístroj by neměly používat osoby s následujícími příznaky/stavy; (před použitím se porad'te s lékařem) ① Zarudnutí pleti a pálení z důvodu nadměrného slunění. ② Alergické stavy citlivé pokožky. ③ Těhotné ženy. ④ Zanícení způsobené akné. ⑤ Dermatitida způsobená kosmetickými přípravky ⑤ Svědivá znaménka a znaménka způsobená fyzickou stimulací

10. FAQ

Ot.1. S jakou intenzitou od úrovně 1 až 4 mám nejlépe začít?

Odp. Začněte úrovní 1 a postupně intenzitu zvyšujte v závislosti na stavu vaší pleti. Je nejlepší používat takovou úroveň, která nejlépe vyhovuje typu vaší pleti.

Ot.2. Je účinnější provádět ošetření opakovaným použitím přístroje Beautycell po dlouhou dobu?

Odp. Použití delší dobu neznamená lepší účinek. Záleží na citlivosti pleti, ale doporučuje se použít kratší než 10 minut.

Ot.3. Jak dlouhý má být interval mezi použitím přístroje Beautycell?

Odp. První 2 týdny aplikujte 3x týdně. Potom interval prodlužte nebo zkrátte v závislosti na přizpůsobení pleti.
※Interval je třeba zkrátit v závislosti na typu pleti. V případě vážných problémů nebo v případě špatného stavu pleti neaplikujte vícekrát po sobě.

Ot.4. Mohu Beautycell použít, když mám na obličeji make-up?

Odp. Ne. Pokud se neodlícíte, do pleti by mohly proniknout nečistoty.

Ot.5. Proč se při používání přístroje Beautycell na pleti objeví pudr?

Odp. Pokud jste nanesli dostatek esence nebo se esence z důvodu delší aplikace vysušila, může to vypadat jako pudr.
Naneste vhodné množství další esence a dodržujte doporučenou dobu používání.

Ot.6. Mohu Beautycell použít v oblasti očního okolí a rtů?

Odp. Ano, můžete. Pokud Beautycell použijete okolo rtů a v oblasti očí, např. na očních víčkách, může nastat zpevňující efekt. Protože jsou ale tyto oblasti citlivé, aplikujte s nižší intenzitou.

Ot.7. Nevadí, když mi bude LED světlo svítit do očí?

Odp. Na kratší dobu to není problém. Pokud ale budete do očí svítit delší dobu, mohlo by je to vyčerpat. Proto se snažte při masáži v této oblasti oči zavřít.

Ot.8. Momentálně nosím rovnátka, můžu použít Beautycell?

Odp. Pokud jsou rovnátka kovová, můžete to způsobit elektrickou reakcí okolo oblastí kovu. Proto aplikujte s nízkou intenzitou nebo se vyhněte oblastí rtů. Reakce s kovem může též způsobit oxidaci slin, což může způsobit nepříjemný pocit.

Ot.9. Můžu Beautycell po použití umýt vodou?

Odp. Ne. Beautycell není voděodolný. Přímý kontakt s vodou by mohl způsobit poruchu. Otfete jej vlhkým hadříkem nebo gázou a znovu důkladně setřete suchým hadříkem. Vyhněte se i oblastem s vysokou mírou vlhkosti.

Ot.10. Mohou Beautycell používat těhotné ženy?

Odp. Ne. Těhotným ženám se použití nedoporučuje.

Ot.11. Jak dlouho trvá záruka na přístroj Beautycell?

Odp. Záruční lhůta je 1 rok.
Další informace o záruce naleznete na straně 22 tohoto návodu k použití.

Ot.12. Jak dlouhá je životnost Beautycellu?

Odp. Přibližně 5 let. Může se lišit v závislosti na prostředí a frekvenci používání..

Ot.13. Jak dlouho se přístroj nabíjí? A jak dlouho vydrží, než se musí znovu nabít?

Odp. Přístroj se nabíjí (do 100 %) přibližně 5 hodin.
(Doba nabíjení se liší v závislosti na úrovni nabití před nabíjením).

Ot.14. Proč se nesmí esence aplikovat na pleť přímo z lahvičky?

Odp. Do lahvičky s esencí by se mohly z pokožky dostat nečistoty nebo bakterie. Esence by se mohla zkazit.

Ot.15. Proč musí být víčko vždy těsně uzavřené a je třeba vyhnout se vniknutí vzduchu?

Odp. Pokud se esence dostane do kontaktu se vzduchem, může se oxidací zkazit.

ZÁRUKA NA VÝROBEK



O servisu

My, společnost Aone Beauty, dáváme záruku na výrobek, podléhající standardnímu řešení spotřebitelských sporů týkající se výrobku (zavedeno komisí Fair Trade Commission). Po vyžádání servisu Aone Beauty nebo určená partnerská firma poskytne servis. Přijetí náhrady škody a podrobnosti o ní budou sděleny do 7 dní a skutečná náhrada škody bude provedena do 14 dní od data sdělení.

Záruční lhůta činí 1 rok a doba držby součástí je 3 roky.

Je-li výrobek používán ke komerčním účelům, záruka činí 6 měsíců.

Bezplatné

Jakákoli závada výkonu nebo funkce v běžném stavu během doby držby součástí		
Druh poškození	Během záruční lhůty	Po záruční lhůtě
Poškození od doby 10 dnů od nákupu	Výměna výrobku nebo vrácení peněz	n/a
Poškození od doby 1 měsíce od nákupu	Výměna výrobku nebo bezplatná oprava	n/a
Poškození během přepravy	Výměna výrobku	n/a
Porucha podruhé ze stejného důvodu	Bezplatná oprava	Oprava za poplatek
Porucha potřetí ze stejného důvodu	Výměna výrobku	Oprava za poplatek
Pokud společnost ztratí opravu požadovanou zákazníkem	Výměna výrobku nebo vrácení peněz	Vrácení částky se zohledněním opotřebení a plus 10 %
Nemožnost opravy z důvodu nedostupné součásti a během doby držby součástí	Výměna výrobku nebo vrácení peněz	Vrácení částky se zohledněním opotřebení a plus 10 %
Součásti jsou k dispozici, ale nelze opravit	Výměna výrobku nebo vrácení peněz	Vrácení částky se zohledněním opotřebení

Porucha způsobená chybou nebo úmyslem zákazníka

Nelze opravit	Výměna produktu, pokud by se částka rovnala poplatku za opravu	Částka je rovna poplatku za opravu Částka je rovna poplatku za opravu
Lze opravit	Poplatek za opravu	Poplatek za opravu

Servis za poplatek

Níže uvedený typ služeb bude zpoplatněn i během záruční lhůty. Pečlivě si přečtěte návod k použití. Servis, který je vyžadován z jiného důvodu, než je porucha může být též zpoplatněn.

Porucha způsobená chybou zákazníka	- Porucha způsobena chybnou manipulací zákazníka nebo chybnou opravou a úpravou. - Chybné použití el. Výkonu. - Porucha způsobena opravou u jiné firmy, než je Aone Beauty nebo její partnerské firmy. - Porucha způsobená externím šokem nebo upuštěním.
Jiné	Porucha způsobená přírodní katastrofou (blesk, požár, vítr, povodně atd.) Součást po uplynutí očekávané doby životnosti (baterie atd.)



LED porace přístroje Beautycell · EMS · péče o pleť



Anti-agingový účinek

- LED - ČERVENÁ(636±10)nm
- Podporuje regeneraci buněk, a tak zlepšuje elasticitu pleti a vrásky, zpomaluje stárnutí.




Bělící účinek

- LED - ŽLUTÁ(592(±10)nm
- Udržuje pleť šistou a zářivou. Zlepšuje vaskulární lézi, melasma, modřinky a červené skvrnky na pleti.



Ošetření problémových oblastí

- LED - MODRÁ(412(±10)nm
- Na základě dezinfekčního a sterilizačního účinku pomáhá zlepšovat akné a keratózu.

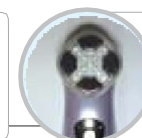

Liftingový účinek

- LED - MODRÁ(412(±10)nm
- Nízkofrekvenční vibrace 200x za sekundu aktivuje metabolismus a regeneraci, zvyšuje elasticitu pleti.

Komplexní péče o pleť

Beautycell vám nabízí korekci, vybělení pleti a funkce na problémovou pleť, které byly k dispozici pouze v kosmetických salónech.

Bezpečná péče o pleť

Beautycell na základě několika klinických testů prokázal svou bezpečnost.

Péče o pleť bez omezení – kvůli nákladům času a prostoru

Beautycell můžete používat kdekoli a kdykoli chcete a nebude vás to nic stát.

Lifting

Nízkofrekvenční vibrace 200x za sekundu aktivují metabolismus pleti a regeneraci, zvyšují elasticitu pleti.

- Tip pro uživatele Beautycell
Applikuje Beautycell po delším aktivitách venku (golf, turistika, rybaření atd.), potom na pleti pocítíte ještě lepší účinek.



Zázračné světlo pro
čistou a zářivou pleť
Beautycell

Profesionální péče o pleť pohodlně z vašeho domova

Už nebudete potřebovat nákladnou a nepohodlnou péči o pleť v kosmetických salónech.
Od tohoto okamžiku si můžete užívat pohodlnou a nákladově úspornou péči o pleť odkudkoli a
kdykoli – s přístrojem Beautycell..

 *Beautycell*

(Hyundai I Valley No.308) 31, Galmachi-ro 244beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 0482-70-4404-5590 E-mail. cellbycell77@naver.com <http://www.cellbycell.co.kr>



Vyrobena v
Koreji

 **CELL BY CELL**
Develop your skin potential