

VIVECA

GALVANICKÁ ŽEHLIČKA

www.vivecakorea.com

Obsah

Bezpečnostní opatření	3
Klíčové vlastnosti produktu	4
Komponenty a název každé části	5
Jak používat – horká a studená masáž	6
Jak používat – EMS lifting	7
Nabíjení baterie	8
Otázky a odpovědi	9
Norma výrobku	10

Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům než těm, které jsou popsány v manuálu.
 - Těhotné nebo kojící ženy by tento produkt neměly používat.
 - Nepoužívejte, pokud máte v těle jakékoliv kovové implantáty.
 - Dávejte pozor, aby vám LED světlo nesvítilo přímo do očí.
 - Tento produkt není voděodolný, proto jej neomývejte vodou ani mokrým kapesníkem.
 - Pokud současně s tímto produktem používáte kosmetiku, nezapomeňte ji z produktu před jeho uložením odstranit suchým kapesníkem
 - Tento produkt má dobíjecí vestavěnou baterii. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku.
 - Dojde-li během nabíjení k silnému zahřátí nebo dojde-li k problému s výrobkem, zastavte nabíjení a kontaktujte zákaznické centrum.
 - Výrobek neupusťte a netřeste s ním.
 - Chraňte před vysokými teplotami a přímým slunečním svitem.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Jedná se o velmi precizní produkt. Svěvolně jej nerozebírejte, nesestavujte ani neupravujte.
- V následujících případech se před použitím poradte s odborníkem.
 - Pokud podstupujete dermatologickou léčbu
 - V případě neobvyklého stavu pokožky
 - Pokud trpíte kožním onemocněním nebo podrážděním pokožky
 - Máte-li alergickou pokožku, dermatitidu, podstupujete léčbu pokožky, jste po plastické operaci, léčíte se s akné nebo s vypadáváním vlasů
 - Pokud máte kardiostimulátor, implantát nebo kovovou protézu.
 - Jestliže trpíte kardiovaskulárním onemocněním
 - Pokud máte poruchu endokrinního systému
 - V případě vady senzorkého nervového systému
 - Jestliže trpíte očním onemocněním, nebo jste po operaci očí
 - Pokud máte epilepsii
 - Máte-li infekční onemocnění
 - Pokud užíváte léky na hormonální nerovnováhu
 - V případě jiného onemocnění nebo neobvyklého stavu
 - Kromě uvedeného, pokud zpozorujete na pokožce nebo těle během používání produktu něco neobvyklého, poradte se před opětovným použitím s odborníkem

Klíčové vlastnosti produktu

HORKÁ & STUDENÁ MASÁŽ

Mikroproudová a galvanická funkce zařízení podporují vstřebávání kosmetiky.

EMS LIFTING (elektrická stimulace svalů)

Napomáhá liftingu pokožky stahováním a uvolňováním svalů nízkofrekvenčním proudem.

LED SVĚTELNÁ TERAPIE

Terapie červeným, zeleným a modrým světlem napomáhá pružnosti a zklidnění pokožky.

3D MASÁŽ

Jemná trojdimenzionální vibrační masáž napomáhá prokrvení pokožky.

Hlavní komponenty



Zařízení




Stojánek



USB kabel

Název každé části

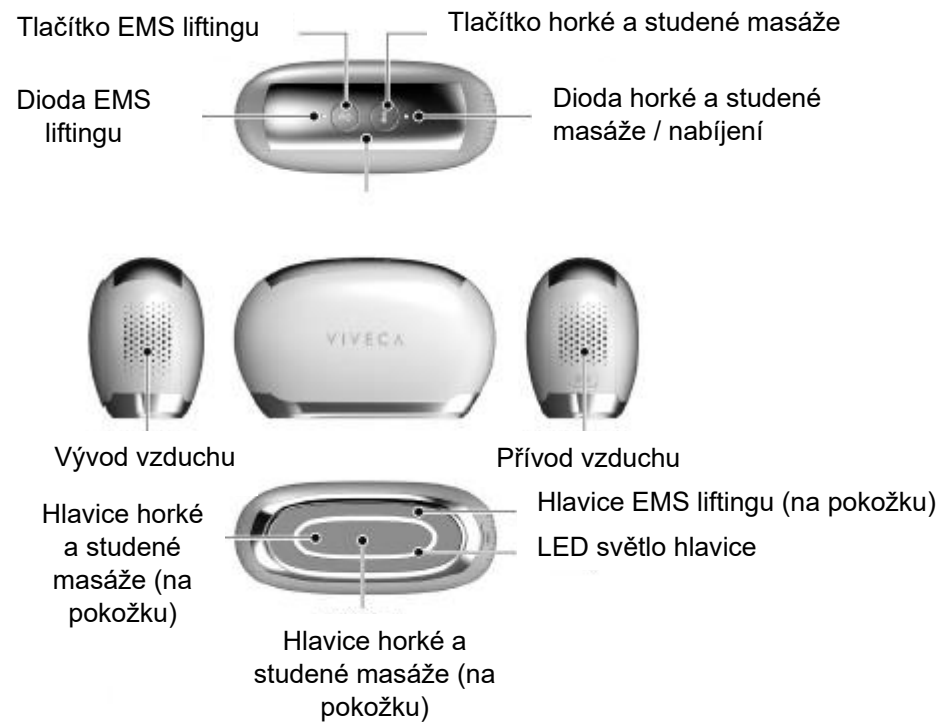

Jak používat – horká a studená masáž

- Horká a studená masáž je funkce, která podporuje vstřebávání kosmetických aktivních složek za pomoci galvanického proudu a mikroproudu.
- Použijte po nanesení tekuté kosmetiky (sérum, ampule, pleťové mléko atd.) na pokožku (obličej) nebo po nanesení pleťové masky na obličej.
- Po zapnutí uchopte zařízení a masážní hlavici přiložte k pokožce (obličej), čímž aktivujete masážní funkci spolu s vibrační masáží.
 - x Masážní funkce nefunguje, pokud je pokožka (ruce, obličej) suchá.

	Ovládání tlačítka masáže	LED světlo hlavice	Zvuk	Dioda	Použití
Zapnutí	• Stiskněte a podržte tlačítko masáže po dobu 1 sekundy	Zelené	Vteřinové cvaknutí	Zelená	
Režim pokojové teploty	• Režim pokojové teploty se automaticky aktivuje po zapnutí zařízení • V režimu studené masáže krátce stiskněte tlačítko masáže po dobu 0,5 sekundy	Zelené	Vteřinové cvaknutí	Zelená	vstřebávání kosmetiky
Horká masáž	• V režimu pokojové teploty krátce stiskněte tlačítko masáže po dobu 0,5 sekundy	Červené	Dvě cvaknutí	Červená	vstřebávání kosmetiky
Studená masáž	• V režimu horké masáže krátce stiskněte tlačítko masáže po dobu 0,5 sekundy	Modré	Tři cvaknutí	Modrá	vstřebávání kosmetiky, zklidnění pokožky
Vypnutí	• Stiskněte a podržte tlačítko masáže po dobu 1 sekundy v jakémkoliv režimu • Automaticky se vypne po 3 minutách v jakémkoliv režimu	X	Vteřinové cvaknutí	X	

Jak používat – EMS lifting

- EMS lifting je funkce, která stahuje a uvolňuje svaly pokožky pomocí nízkofrekvenčního proudu.
- Použijte po nanesení tekuté kosmetiky (sérum, ampule, pleťové mléko atd.) nebo gelu na pokožku (obličej).
- EMS lifting začne po tom, co se zařízení zapne a hlavice se dostane do těsného kontaktu s pokožkou (obličej).
- × Funkce EMS lifting nefunguje, pokud je pokožka (obličej) suchá. Funkce vibrační masáže nefunguje současně s liftingem.

	Ovládání tlačítka liftingu	LED světlo hlavice	Zvuk	Dioda	Použití
Zapnutí	• Stiskněte a podržte tlačítko liftingu po dobu 1 sekundy	Bílé	Vteřinové cvaknutí	Červená	
Úroveň frekvence 1	• Úroveň 1 se automaticky aktivuje po zapnutí zařízení • Na úrovni 3 krátce stiskněte tlačítko liftingu po dobu 0,5 sekundy	Bílé	Vteřinové cvaknutí	Červená	pružnost pokožky
Úroveň frekvence 2	• Na úrovni 1 krátce stiskněte tlačítko liftingu po dobu 0,5 sekundy	Bílé	Dvě cvaknutí	Červená	pružnost pokožky
Úroveň frekvence 3	• Na úrovni 2 krátce stiskněte tlačítko liftingu po dobu 0,5 sekundy	Bílé	Tři cvaknutí	Červená	pružnost pokožky
Vypnutí	• Stiskněte a podržte tlačítko liftingu po dobu 1 sekundy na jakékoliv úrovni • Automaticky se vypne po 3 minutách na jakékoliv úrovni	X	Vteřinové cvaknutí	X	

- Doba používání je pro každou úroveň nastavena na 3 minuty. Pokud chcete zařízení používat déle, zapněte zařízení a zvolte si úroveň.
- Síla nízkofrekvenčního proudu se liší v závislosti na typu kosmetiky a hydrataci pokožky, proto zvolte a používejte vhodnou úroveň.

Nabíjení baterie

- Před použitím produkt dostatečně nabijte.
- Pro nabíjení používejte k tomu určený kabel a originální adaptér 5V 2A.
 - × Použití vysokorychlostní nabíječky pro nabíjení mobilních telefonů může způsobit poruchu.

1. Spojte nabíjecí kabel s adaptérem.
2. Zapojte nabíjecí adaptér do zásuvky.
3. Připojte kabel k nabíjecí části produktu.

Nabíjení ----- dioda masáže/nabíjení svítí červeně

Plně nabito ----- dioda masáže/nabíjení svítí zeleně

× Během nabíjení nejsou dostupné všechny funkce.



Dioda ukazuje stav nabití

Při problémech prosím nejdříve zkontrolujte

O: Produkt nefunguje.

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka masáže nebo liftingu po dobu 1 sekundy zařízení zapnete.
- 2) Po zapnutí zkontrolujte, zda se správně rozsvítilo LED světlo hlavice.
- 3) Pokud LED světlo hlavice nesvítí, zařízení je vybité. Zařízení před použitím nabijte.

O: Horká a studená masáž nefunguje

- 1) Stiskněte tlačítko masáže abyste zařízení zapnuli.
- 2) Pokud máte suché ruce a obličej, zařízení nemusí fungovat, použijte jej, když máte dostatečně hydratované ruce a obličej.
- 3) Aby masážní hlavice fungovala, musí být v těsném kontaktu s pokožkou.
- 4) Pokud zazní zvukový signál vibrační masáže a LED na hlavici svítí odpovídající barvou, vše funguje, jak má.
- 5) Při použití pro studenou masáž je mírný hluk chladicího větráku normální provozní stav.
- 6) Zvolte si a použijte režim, který vám vyhovuje.

O: EMS lifting nefunguje

- 1) Stiskněte tlačítko liftingu abyste zařízení zapnuli.
- 2) Pokud je pokožka (obličej) suchá, zařízení nemusí fungovat, proto jej použijte s vhodně hydratovanou pokožkou.
- 3) Liftingová funkce se spustí pouze když liftingová hlavice přilne k pokožce (obličej).
- 4) Pokud se na hlavici rozsvítí LED, jedná se o normální provozní stav.
- 5) Funkce vibrační masáže není během EMS liftingu k dispozici.
- 6) Zvolte si a použijte úroveň frekvence, která vám vyhovuje.

O: Zařízení přestalo fungovat během používání

- 1) Zařízení se automaticky vypne po 3 minutách provozu.
- 2) Můžete ho znovu používat po opětovném zapnutí.

Norma výrobku

Název produktu	VIVECA galvanická žehlička
Součásti produktu	1 zařízení, 1 stojánek, 1 USB kabel
Velikost	Zařízení 110 (Š) x 48 (H) x 67 (V) mm Stojánek 125 (Š) x 68 (H) x 20 (V) mm
Váha	Zařízení: 145 g
Materiál	ABS, PC atd.
Napájení	DC 3,7V, 900mAh / lithium-polymerová dobíjecí baterie Doba použití: asi 50 minut (nepřetržitý provoz) Doba nabíjení: cca 60 minut
Adaptér	AC/DC adaptér Nabíjecí adaptér 5V 2A (doporučeno)
Značka	VIVECA
Původ	Korejská republika
Zákaznické centrum	info@vivecakorea.com